

Obsah

1. Súhrn produktu	2
1.1. Popis tlačidiel	2
2. Princíp expozície.....	2
3. Zakázané použitie	2
4. Bezpečnostné opatrenia	3
5. Špecifikácie výrobku	6
6. Návod pre použitie	7
6.1. Príprava pred použitím	7
6.2. Kroky pri použití	7
Referenčná tabuľka terapeutického cyklu	8
7. Starostlivosť po použití	9
8. Riešenie problémov	10
9. Vyhlásenie	11
10. Popredajná servisná karta	12

Depilátor pri bode mrazu všeobecná verzia pokynov

1. Súhrn produktu

1.1 Popis tlačidiel



2. Princíp expozície


Prístroj využíva medzinárodnú pokročilú fotónovú kozmetickú IPL technológiu, ktorá priamo ožaruje pokožku silným pulzným svetlom, čím vytvára fotobiochemický efekt. Na jednej strane dokáže kolagénové vlákno a elastické vlákno v pokožke regenerovať, obnoviť pružnosť pokožky, zlepšiť povrchovú mikrocirkuláciu a odstrániť alebo zosvetliť vrásky. Na druhej strane silné pulzné svetlo môže preniknúť kožou a byť selektívne absorbované pigmentovanou hmotou a kapilármi v tkanive. Impulz nezničí normálne kožné tkanivo, tepelná energia spôsobí zrážanie krvi a pigmentovanú hmotu zničenú tepelným rozkladom, ošetrí kapilárnou dilatáciou, čím spôsobí odstránenie farebných škvŕn, odstránenie prebytočných chĺpkov, atď.

3. Zakázané použitie

Dôležité bezpečnostné informácie - prečítajte si pred použitím

Dôležité bezpečnostné informácie - prečítajte si pred použitím

- Pozrite si typ pleti na strane 2 [obrázok kontroly farby pleti]. Ak ste kategória VI, nepoužívajte tento nástroj, inak pravdepodobne spôsobí nežiaduce reakcie pokožky, ako je pigmentácia a depigmentácia, silné začervenanie a opuch alebo pálenie.

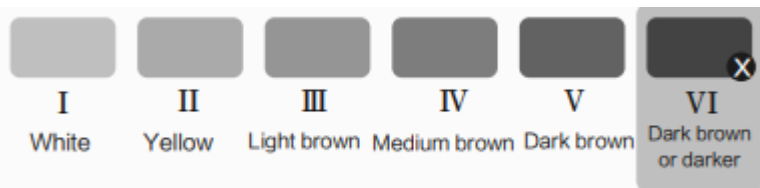

4. Bezpečnostné opatrenia

· Osobitná pozornosť

· Pred použitím neaplikujte žiadne gély ani ošetrojúce produkty (aloe vera gél atď.). Uistite sa, že ste výrobok zostavili a používate v súlade s predpismi uvedenými v návode na použitie.

· Pozorne si prečítajte „Návod na obsluhu“ a uschovajte si ho pre budúce použitie, ak máte počas používania nejaké otázky, kontaktujte prosím online zákaznický servis v požadovanom jazyku.

○ **NEBEZPEČENSTVO**: Zranenie osôb v dôsledku nesprávnej obsluhy

● **VAROVANIE**: Nebezpečný obsah v dôsledku nesprávnej obsluhy

▲ **UPOZORNENIE**: Obsah týkajúci sa osobnej bezpečnosti alebo poškodenia majetku v dôsledku nesprávneho použitia



Poznámka k výstražnému symbolu: Nepoužívajte vo vani ani v sprche.

· **VAROVANIE**: Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vaní naplnených vodou, sprchovacích kútov, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Uchovávajte tento produkt a napájací adaptér v suchu;

Ak je produkt poškodený, nedotýkajte sa žiadnych vnútorných častí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom;

· Do produktu nekladajte žiadne predmety a neumiestňujte produkt svojvoľne;

· Tento produkt nepoužívajte v okolí očí. Nosenie ochranných okuliarov je normálna operácia, ktorá chráni používateľa. Ak prevádzkujete v okolí očí, ochranné okuliare nemusia úplne blokovať energiu a svetlo bude absorbované melanínom dúhovky vo vašich očiach na blízku vzdialenosť;

· Pri každom použití tohto produktu odporúčame nosiť ochranné okuliare. Hoci svetlo nebude priamo ovplyvňovať vaše oči, vysokofrekvenčné blikajúce svetlo môže ovplyvniť váš zrak;

· Keď potrebujete odstrániť chĺpky na chrbte, možno budete potrebovať pomoc asistenta alebo partnera. Toto je naše odporúčanie, pretože sa obávame, že môžete byť v ohrození, ak ho budete používať samostatne;

· Ak sú vaše chĺpky dlhšie ako 1 mm, najskôr si ich oholte. Ak nadmerné ochlpenie absorbuje teplo na povrchu pokožky, spôsobí začervenanie a opuch pokožky a spálené chĺpky budú produkovať zvláštny zápach, ktorý ovplyvní váš zážitok z používania produktu;

· Ak pokožka v ožarovanej oblasti nie je suchá alebo čistá, ovplyvní to efekt použitia a môže spôsobiť, že produkt nebude blikáť alebo bude náhodne blikáť;

· chýbajú nám údaje o použití prípravku u detí mladších ako 15 rokov, preto odporúčame dbať na to, aby sa deti do 15 rokov nedostali do kontaktu so zariadením. Pri obsluhu prístroja sa držte mimo dosahu detí mladších ako 15 rokov;

· používajte rôzne intenzity svetla pre rôzne časti tela, pretože ich pokožka je odlišná;

· ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ho vymeniť odborník z oddelenia údržby výrobcu alebo podobného oddelenia.

Varovanie

- Nepoužívajte antiperspiranty bezprostredne po zákroku v podpazuší; · pravidelne kontrolujte a čistite nečistoty na ožarovacej bráne, aby ste predišli popáleniu a poruche počas používania;
- Neumiestňujte ožarovací portál do blízkosti predmetov, ktoré sa dajú ľahko demagnetizovať, aby ste predišli ich poruche a poškodeniu;
- Nepoužívajte ho pri blokovaní odvodušňovacieho otvoru, pretože to môže spôsobiť dym a požiar;
- Nemierte ožarovacím portálom na čierne predmety, aby ste predišli abnormálnemu chodu stroja;
- Neosvetľujte oblečenie, vlasy a iné predmety, aby nedošlo k popáleniu, zmene farby a ich poškodeniu;
- Nepoužívajte na domáce zvieratá, aby ste predišli ich poraneniu;
- Nepoužívajte tento výrobok okolo očí, aby ste predišli poraneniu očí;
- Po použití utrite produkty starostlivosti o vlasy a pokožku používané pri odstraňovaní chĺpkov, aby ste zabránili poruche a poraneniu pokožky;
- Nepoužívajte ho v blízkosti detí. Depilátor vyžaruje silné svetlo a môže ľahko poškodiť oči dieťaťa.
- Nastavte intenzitu ožarovania podľa stavu vašej pokožky. Pri prvom použití určite použite prvú úroveň;
- Ak je pokožka po použití mierne horúca a červená, je to normálne;
- Produkt po zapnutí nemôže zostať bez dozoru, po použití ho ihneď vypnite;
- Očistite pokožku, aby ste sa uistili, že na povrchu pokožky nie sú žiadne zvyšky vlasov, je úplne suchá a bez mastných látok a škvŕn;
- Ak rozdiel okolitej teploty presiahne 20 stupňov (od nízkej teploty k vysokej teplote alebo naopak). vypnite prístroj a nechajte ho v kľude. Po približne 2 hodinách ho znova použite;
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých a výbušných materiálov (vrátane postrekovačov a čerpacích staníc atď.), ktoré môžu spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom,
- Okolitá teplota pri tomto odstraňovaní chĺpkov je 0-45 C, pred použitím overte izbovú teplotu;
- Do 24 hodín po ožarení sa vyhnite priamemu ultrafialovému žiareniu;
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo ultrafialovému žiareniu na dlhú dobu, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu výrobku;
- Ak zabudovaný ventilátor po zapnutí nefunguje (nie je počuť šumenie), nepoužívajte ho, aby ste predišli poruchám, ako je dym a požiar.

Nevhodné pre používateľov a situácie

- Nevhodné pre tehotné ženy, dojčiace ženy, menštruačné obdobia žien, telesné jazvy, pri cukrovke, krehkej pokožke a pokožke citlivej na svetlo;
- Závažné ochorenia srdca, stredne ťažká až ťažká hypertenzia, zhubné nádory, folikulitída, infekčné kožné ochorenie, popálená koža a antikoagulačné poruchy sú pre použitie zariadenia nevhodné;
- Nepoužívajte, ak máte abnormálny metabolizmus kolagénu, vrátane anamnézy jaziev a zlého hojenia rán;
- Pacienti s vaskulárnymi ochoreniami, ako sú kŕčové žily a vazodilácia v mieste ožiarenia;
- Nepoužívajte, ak je vaša pokožka citlivá na svetlo a náchylná na vyrážky alebo alergie;
- Nepoužívajte ho, ak je vaša ožarovaná oblasť infikovaná, herpes simplex, kožnými léziami a hematómom;
- nevhodné pre pacientov s poruchami a chorobami imunity (vrátane infekcie HIV, lupus erythematosus, porfýrie atď.);
- Zakázané pre akéhokoľvek pacienta s poruchou krvácania a pacientov, ktorí užívajú izotretinoín, ovocnú kyselinu (AHA), kyselinu salicylovú (BHA) alebo kyselinu azalku;
- Prosím, používajte tento produkt opatrne pre tých, ktorí používajú chemické odstránenie chĺpkov do 30 dní, tých, ktorí použili produkty na bielenie pokožky v krátkom čase, alebo tých, ktorí použili zložky vitamínu A;
- Nepoužívajte súčasne s produktmi z esenciálnych olejov. Uistite sa, že pokožka v osvetlenej oblasti je čistá a suchá. Nepoužívajú sa žiadne mlieka, lubrikanty a iná kozmetika.
- Ak povrch pokožky nie je čistý a suchý, môže to ovplyvniť skúsenosti s používaním produktu a môže to dokonca poškodiť produkt;
- zakázané počas užívania aspirínových liekov, imunosupresívnych liekov, izotretinoínu a iných liekov. Zakázané používať pri nedávnom užívaní liekov citlivých na svetlo (ako je tetracyklín a sulfa).

Nepoužívajte pre nasledujúce časti tela alebo nasledujúce stavy

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1/ Intraorálna, genitálie, sliznice, atď. | 2/ Plastická chirurgia |
| 3/ uzliny | 4/ očná buľva, viečko, okolie očí |
| 5/ hlava | 6/ Oblasť akné |
| 7/ Tetovanie, maľovanie na telo | 8/ obočie, vlasy |
| 9/ ucho | 10/ Bradavka, Areola |
| 11/ Vo vnútri pupka | 12/ veľká žila |
| 13/Tetovanie, maľovanie na telo | |

(Poznámka: Tento zoznam nie je úplný, ak si nie ste istý, či môžete tento produkt použiť, odporúčame vám poradiť sa s lekárom)

Poznámky

1. Nepoužívajte prístroj v spojení s prirodzene tmavou pokožkou
2. Nevystavujte sa žiareniu pred odstránením chĺpkov
3. Pred použitím sa najskôr ohol'te (nepoužívajte metódu chemického odstraňovania chĺpkov)
4. Pri prvom použití nezabudnite spustiť na prvú úroveň
5. Pri príprave odstraňovania chĺpkov sa uistite, že okienko na odstraňovanie chĺpkov je blízko pokožky a potom vykonajte operáciu odstraňovania chĺpkov.
6. Zakázané používať v tmavom prostredí
7. Pri používaní noste ochranné okuliare
8. Nepoužívajte ho na priamom slnečnom svetle, aby ste predišli poruche zariadenia.
9. Nevystavujte tento produkt prudkým nárazom ani otrasom
10. Neodpájajte priamo zo siete bez vypnutia zariadenia, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.

Upozornenie: Keď používate zariadenie na odstraňovanie chĺpkov a máte prestávku, uistite sa, že vstup smeruje nahor a displej LCD nadol, čo je prospešné pre odvod tepla a chladenie.

5. Špecifikácie výrobku

Princíp zariadenia	IPL 光子美容技术		
Čistá hmotnosť zariadenia	260g		
Oblasť ožarovania	3cm ²		
Spektrum zariadenia	≥530nm		
Menovité nap.	12V DC		
Vstupný výkon	24W		
Prepravné a skladovacie prostredie	Prevádzkové prostredie		
Rozsah skladovacej teploty	-20-50°C	prevádzkovej teploty	5-40°C
vlhkosť	10%-90%RH	vlhkosť	10%-90%RH
Relatívny tlak	700-1060hPa	Relatívny tlak	700-1060hPa

6. Návod pre použitie

6.1 Príprava pred použitím

1. Najskôr odstráňte chĺpky z povrchu pokožky. Chĺpky určite najprv namočte, pomocou metódy mokrého škrabania, čím vopred ošetríte pokožku, aby sa chĺpky pod povrchom pokožky mohli absorbovať do svetelného zdroja, aby sa zabezpečil efekt ošetrovania. Ak chĺpky nepresahujú 2 mm, môžete prístroj prevádzkovať bez holenia.
2. Očistite pokožku a uistite sa, že na jej povrchu nie sú žiadne chlpy, je úplne suchá a bez akýchkoľvek mastných látok. Pred použitím fotónového depilátora je prísne zakázané aplikovať kondicionér, gél z aloe a iné produkty, inak to povedie k nedostatku svetla (treba aplikovať iba pre veľké zariadenia v kozmetických salónoch, ale nie na použitie v domácnosti).

6.2 Pokyny pre použitie

- 1: Vložte adaptér, digitálna trubica trikrát zabliká a potom zhasne (biela digitálna trubica s ikonou bodu mrazu).
- 2: Dlhé stlačenie prepínacieho tlačidla na 1,5 s, zapnutie/vypnutie, predvolený je prvý stupeň po zapnutí, krátkym stlačením prepínača zvýšite stupeň, 1-2-3-4-5-4-3-2-1, a ďalej cykľujte.
- 3: Bod mrazu: Po spustení nie je štandardne k dispozícii žiadny chladiaci výkon (ikona bodu mrazu na displeji sa nezobrazuje). Krátkym stlačením tlačidla chladenia zapnete/vypnete funkciu chladenia a ikona bodu mrazu na displeji sa zapne alebo vypne.
- 4: Po spustení zariadenia stlačte tlačidlo svetla (pod podmienkou, že hlava je blízko pokožky), aby ste vstúpili do režimu manuálneho zapnutia svetla. Na 1,5 s dlhým stlačením leštiacich tlačidiel, otvoríte alebo zatvoríte automatický režim svetla, digitálna trubica automaticky rozsvieti/vypne ikonu, svetlo automaticky po rozsvietení ikony, automaticky zažiarí (stav hlavica pokožka), po nepretržitom osvetlení.

6.3 Kroky pre použitie

1. Vyberte prístroj a vyčistite filter na hlave stroja mäkkou handričkou.
2. Pred použitím tohto zariadenia najprv navlhčíte chĺpky a ohol'te ich holiacim strojčekom.
3. Pripojte napájací adaptér a na obrazovke zariadenia sa zobrazí slovo „OFF“.
4. Dlhé stlačte „tlačidlo zapnutia“, kým sa nezobrazí displej (zmena obsahu displeja).
5. Ak sa obsah displeja zmení z „blikania“ na „normálne jasné“, znamená to, že depilátor je pripravený na prípravu energie (prvý záblesk je jasný a oči sa mu nemusia prispôsobiť, používajte ochranné okuliare, aby ste znížili nepohodlie záblesku v očiach).

6. Obsah obrazovky displeja je „vždy zapnutý“, keď je prístroj v stave „pripravený na expozíciu“; Ak obsah displeja zostane nezmenený, skúste odpojiť napájací adaptér a reštartovať zariadenie.

7. Prítlačte depilátor vertikálne na pokožku pod uhlom 90°, aby ste sa uistili, že s pokožkou je úplne v kontakte. V tomto okamihu „číslo“ na obrazovke „blikne“.

(Pri prvom použití depilátora sa pokožka neprispôsobí, takže dôjde k pocitu "mikroprúdu", čo je normálna reakcia ľudského tela, ktorá nie je spôsobená unikajúcim prúdom zariadenia).

8. Po priložení zariadenia na pokožku jemne stlačte na prístroji „tlačidlo blesku“, prístroj vydá bliknutie a zazvonenie „prasknutie“, potom pocítite, že záblesk vyvolá pocit tepla (napríklad ak je teplota príliš vysoká, znížte úroveň vyžarovania a použite zariadenie znova).

9. Použitie nástrojov používaných po záblesku, zmena častí na odstraňovanie chĺpkov, pripravené na vydanie energie, „pokyny k úrovni výkonu“ budú zobrazené na displeji „normálne zapnuté“, môžete zopakovať vyššie uvedený krok 7.

10. Na otestovanie pokožky použijete prvý stupeň, ak po 24 hodinách nedôjde k žiadnej nežiadúcej reakcii, energetický stupeň je možné nastaviť na vyššiu úroveň pomocou "tlačidla zapnutia", energetický stupeň je rozdelený do 5 úrovní.

11. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na odstránenie chĺpkov na vybranej časti. Depilačný cyklus vykonajte na celej oblasti a potom ho vykonajte druhý a tretíkrát.

12. Predtým sa pokúste blysnúť v blízkosti oblasti blesku, aby ste sa úplne vysporiadali s požadovanými časťami.

13. Po použití, prosím, dlho stlačte tlačidlo "zapnúť" pre vypnutie (po vypnutí produkt prejde do stavu vypnutia), obrazovka prejde do stavu "OFF" a vypne sa napájanie. Nakoniec vyčistite hlavu a telo.

Predstavenie modelu

· Režim nepretržitého chodu (pre veľké plochy, ako sú ruky, nohy):

Umiestnite výstup svetla na ošetrovanú oblasť pokožky a nechajte úplne prilnúť na pokožku. V tomto okamihu sa rozsvieti lampa senzora odstraňovania chĺpkov, čo znamená, že hlava lampy je v úplnom kontakte s pokožkou. Dlhú stlačte tlačidlo blesku a okamžite začnite pomaly a rovnomerne pohybovať prístrojom po pokožke, pričom udržiavajte priliehavosť k pokožke, záblesk bude vyžarovaný v určitom intervale. V tomto čase nechajte depilátor v pohybe a posúvajte zariadenie dvakrát dopredu a dozadu v oblasti, kde je potrebné odstraňovanie chĺpkov. Zabezpečte, aby bola oblasť odstraňovania chĺpkov pokrytá rovnomerne a aby sa zabránilo chýbajúcemu svetlu.

Tip: Rýchlosť pohybu po pokožke je možné upraviť podľa rýchlosti záblesku, takže pokrytie je rovnomernejšie, frekvencia zábleskov je rýchlejšia na prvom stupni, frekvencia zábleskov je pomalšia na druhom stupni a čím je stupeň vyšší, tým pomalšia je rýchlosť výstupu svetla.

· Režim jednotkového výstupu (vhodný pre malé oblasti, ako sú prsty) Umiestnite výstup svetla na oblasť pokožky, ktorá sa má ošetrovať, a úplne prítlačte k pokožke. V tomto čase sa rozsvieti lampa depilátora, čo znamená, že hlava lampy je v úplnom

kontakte s pokožkou. Krátkym stlačením tlačidla blesku spustíte odstraňovanie chĺpkov. Presuňte hlavu lampy na ďalší kúsok pokožky, počkajte, kým sa rozsvieti biela kontrolka depilátora a potom stlačte tlačidlo blesku, opakujte vyššie uvedené operácie.

Tip: Kedykoľvek počas procesu odstraňovania chĺpkov, ak sa vaša pokožka začína prehrievať, urobte pauzu na niekoľko sekúnd, nechajte výstup svetla opäť vychladnúť a potom pokračujte v odstraňovaní chĺpkov.

Referenčná tabuľka terapeutického cyklu

1-4 týždenne	5-6 týždenne	7-8 týždenne	Viac ako 8 týždňov
2-3 týždenne Viac ako 75% chĺpkov odpadne prirodzene	Dvakrát za týždeň Nové chĺpky odpadnú a zamedzí sa rastu nových	Raz týždenne Chĺpky sú tenšie a po vypadnutí už nerastú.	1-2 týždenne Používajte ho selektívne podľa stavu rastu chĺpkov (použite zariadenie až keď sú viditeľné)

7. Starostlivosť po použití

preventívne opatrenia po odstránení chĺpkov

· Odporúča sa vyhnúť sa kontaktu s vodou do 6 hodín po operácii odstraňovania chĺpkov a potom je možné na zvlhčenie ožarovanej oblasti použiť vodu.

· Po depilácii pokožky nepoužívajte parfumy, masky ani kozmetiku obsahujúcu matné guľôčky. Vyhnite sa vystaveniu UV žiareniu 24 hodín po depilácii a ak je to nevyhnutné, aplikujte opaľovací krém.

· Opaľovanie pravdepodobne spôsobí stmavnutie pokožky alebo spálenie od slnka. Ožarovanie v tomto čase spôsobí začervenanie, opuch a zápal. Preto počas používania tohto produktu dávajte pozor, aby ste sa nevystavovali slnku a čas na regeneráciu spálenia nie je kratší ako 1 týždeň.

· Počas odstraňovania chĺpkov nie je povolené umelé opaľovanie.

· Ak potrebujete plastickú operáciu po odstránení chĺpkov (len v oblasti odstraňovania chĺpkov), poraďte sa so svojím lekárom.

· Ak sa necítite dobre, poraďte sa so svojím chirurgom.

Čistenie a údržba

· Aby ste zaistili čo najlepšie výsledky a najdlhšiu životnosť produktu, vyčistite produkt pred a po každej epilácii, aby ste predišli dlhodobému hromadeniu chĺpkov a prachu. Ak ho nevyčistíte správne, produkt nedosiahne jeho správny účinok.


· Pred začatím čistenia musí byť zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete, aby mohol prístroj vychladnúť.

· Pomocou mäkkej, čistej a suchej handričky utrite a vyčistite zrkadlový povrch vývodu svetla.

- Prístroj skladujte v suchom, bezprašnom prostredí pri teplote -10-60°C.
 - Nikdy neumývajte výrobok a príslušenstvo pod tečúcou vodou a v umývačkách riadu.
 - Na čistenie výrobku nepoužívajte oceľové guľôčky, abrazívne čistiace prostriedky (zubná pasta atď.) ani korozívne kvapaliny (benzín, motorový olej, acetón atď.).
- Poznámka: Ak voda nečistí dobre, môžete použiť niekoľko kvapiek alkoholu s vysokou koncentráciou (nie viac ako 96%) na čistenie vyššie uvedených častí.

Ochrana životného prostredia

Pri likvidácii výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Mali by ste ho poslať do určeného recyklačného strediska. Je to dobré pre životné prostredie

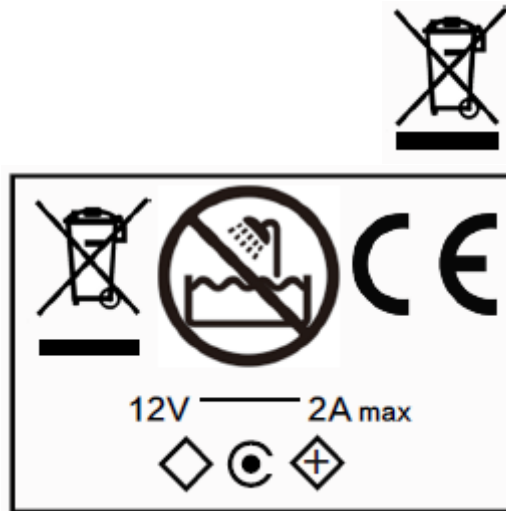

8. Riešenie problémov

V tejto kapitole sú načrtnuté najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytujú pri používaní tohto zariadenia. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou nasledujúcich informácií, kontaktujte centrum služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Popis problému

Zariadenie/napájací adaptér sa počas používania zahrieva

Priložil som depilátor na pokožku a [číslo zablikalo], ale spustil sa chladiaci ventilátor.

[Flash ready] bliká, ale zariadenie neblinká, keď stlačíte tlačidlo blesku. Nemôžem zvýšiť alebo znížiť nastavenie intenzity záblesku.

Pri používaní zariadenia je nepríjemný zápach.

V priebehu ošetrovania je pokožka pri používaní prístroja citlivejšia ako obvyčajne / neznesiteľná bolesť.

Kožná reakcia bola na konci ošetrovania pokožky dlhšia ako zvyčajne.

Možné príčiny

Toto je normálny jav.

Ochrana proti prehriatiu bola aktivovaná.

Zariadenie je potrebné resetovať.

Zariadenie je potrebné resetovať.

Príslušenstvo alebo filtre sú príliš znečistené Vlasý ste z ošetrovaného miesta úplne neodstránili. Tieto chĺpky sa môžu spáliť a spôsobiť nepríjemný zápach.

Nastavenie intenzity svetla, ktoré používate, je príliš vysoké

Z miesta ošetrovania ste úplne neodstránili chĺpky.

Ultrafialový filter na výstupe je poškodený.

Toto zariadenie používate tam, kde je jeho použitie zakázané.

Toto zariadenie nie je vhodné pre vašu pokožku.

Nastavenie intenzity svetla, ktoré používate, je príliš vysoké.

Riešenia

Nie je potrebné podnikat' žiadne kroky

Keď sa spustí ochrana proti prehriatiu ventilátor stále nepretržite beží. Nevypínajte napájanie zariadenia, pred ďalším používaním počkajte, kým vychladne dlhšie ako 15 minút.

Resetujte zariadenie, vypnite ho a znova ho zapnite.

Resetujte zariadenie, vypnite ho a znova ho zapnite.

Prosím, dôkladne vyčistite príslušenstvo. Pred použitím tohto nástroja odstráňte chĺpky na povrchu pokožky.

Skontrolujte, či je zvolené správne nastavenie intenzity svetla. V prípade potreby znížte nastavenie intenzity.

Pred použitím tohto nástroja odstráňte chĺpky na povrchu pokožky.

Po poškodení UV filtra toto zariadenie ďalej nepoužívajte. Obráťte sa na centrum služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Toto zariadenie nepoužívajte v nasledujúcich oblastiach: bradavky, areola, malé pysky ohanbia, vagina, konečník, ako aj vnútro nosných dierok a uší. Muži by nemali používať výrobok na tvári alebo miešku.

Pri typu pleti VI alebo V, hnedo-čierna alebo tmavá pleť, prosím nepoužívajte toto zariadenie.

Nabudúce zvolte nižšiu intenzitu svetla. Pozrite si časť „testovanie pokožky“ v časti „Návod na použitie“

Nie som spokojný s výsledkom priebehu ošetrenia pokožky.

Nastavenie intenzity svetla, ktoré používate, je príliš nízke.

Neožiarili ste už oblasť, ktorú ste pred tým ožarovali.

Toto zariadenie nemá žiadny vplyv na farbu chĺpkov.

Frekvencia používania nástroja je nedostatočná.

Vaša odpoveď na liečbu IPL môže byť pomalá.

Nabudúce zvolte vyššie nastavenie.

Prosím, spustíte záblesk čo najbližšie k predchádzajúcej časti.

Musíte úspešne odstrániť všetky chĺpky. Odporúča sa dodržiavať odporúčaný liečebný postup

Odporúča sa dodržiavať odporúčaný liečebný postup. Interval zákrokov môžete skrátiť, nie však viac ako raz za dva týždne.

Pokračujte v používaní prístroja minimálne 6 mesiacov, pretože chĺpky počas tohto obdobia opäť narastú, ale ich počet bude naďalej ubúdať.

9. Zrieknutie sa zodpovednosti

Od dátumu kúpy, platí záruka na celý prístroj do 12 mesiacov. No neplatí pri žiadnom z nasledujúcich bodov:

1. Neprevádzkovanie v súlade s požiadavkami príručky, a údržba s následkom poškodenia produktu
2. Poškodenie produktu spôsobené nesprávnou obsluhou počas používania (umývanie, ponorenie atď.)
3. Poškodenie produktu spôsobené prekročením hodnôt okolitého prostredia pri používaní (ako je vysoká teplota, korózia atď.).
4. Poškodenie produktu spôsobené abnormálnymi vonkajšími silami (pád, vytlačanie, náraz atď.).
5. Poškodenie výrobku spôsobené vyššou mocou (požiar, povodeň, úder blesku atď.).
6. Škody spôsobené použitím iných než továrenských dielov a nadstavcov.

V prípade zmien uvedených vyššie majú prednosť príslušné predpisy novo formulované našou spoločnosťou alebo príslušné zákony a predpisy aktualizované štátom.

10. Popredajná servisná karta

Vážený zákazník

V prvom rade vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt, aby sme vám mohli poskytnúť tie najlepšie služby. Aby ste mohli využívať služby tohto zariadenia k vašej plnej spokojnosti, prečítajte si pozorne tento popis a po zakúpení si tento záručný list dobre uschovajte

Ak máte nejaké otázky, komunikujte s nami včas a my vám ich čo najskôr zodpovieme!

1. Ak sa vyskytne problém s kvalitou, ktorý spôsobuje, že tovar je nepoužiteľný, obráťte sa na popredajný zákaznicky servis predajcu u ktorého ste produkt zakúpili.
2. Neakceptujeme žiadne neohlásené poštové zásielky. Obráťte sa najprv na náš popredajný servis, ktorý bude riešiť preberanie zásielok a refundáciu poštovného.
3. Prosím pozorne vyplňte záručný list popredajného servisu a vráťte ho spolu s tovarom, aby sme sa s ním mohli čo najskôr zaoberať.

Skutočné meno:(povinné) _____ Kontaktné číslo: (povinné) _____

Spôsob zakúpenia: _____ Nákupný účet: _____

Číslo objednávky: _____

Výber požiadavky: (povinné) Vrátenie tovaru Výmena tovaru

Prijímacia adresa: (povinné) _____

Pokyny na vrátenie: _____