

Používateľská príručka



Hyperblade H1

- Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt Hyperblade H1. Pred jeho použitím si pozorne prečítajte túto príručku a pri používaní dodržiavajte všetky pokyny tu uvedené.
- Pre bezpečné používanie si prosím prečítajte „Bezpečnosť a Varovania“, ešte pred začiatkom používania.
- Túto príručku pre budúce nahliadnutie bezpečne uchovajte.

Bezpečnosť a Varovania

Varovania	
Vylúčené osoby	<ul style="list-style-type: none">• Pacienti s kardiostimulátorom, alebo trpiaci srdcovou arytmiou• Pacienti s kognitívnou poruchou alebo paralýzou pokožky• Novorodenci / Tehotné ženy / Batoľatá (do 60 dní po pôrode)
Vylúčené časti tela	<ul style="list-style-type: none">• Časti tela, do ktorých je vložený kov/plast• Poranená pokožka• Srdce / Oba bočné krčné tepny / Krk
Zakázané úkony	<ul style="list-style-type: none">• Zakázané ponoriť zariadenie do vody• Zakázané používať tento produkt pri šoférovaní alebo práci na iných strojoch.• Zakázané rozoberať alebo opravovať tento produkt
Pokyny	<ul style="list-style-type: none">• Nevkladajte zariadenie do blízkosti silného magnetického poľa• Nemasírujte jednu časť tela príliš dlho, mohlo by to spôsobiť zápal.
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none">• Po použití zariadenie očistite handričkou alebo obrúskom• Uchovávajte mimo dosahu detí

Špecifikácie produktu

Názov	Hyperblade
Model	H1
Batéria	Lithium-Polymer 1100 mAh
Čas nabíjania	4 hodiny (DC 5V)
Pracovný čas	5 – 7 hodín, v závislosti od intenzity masáže
Vstup	3.7V
Max. výkon	0.5W
Hmotnosť	8oz
Rozmery	5.7 x 4.5 x 1.2 palcov (DxŠxV)

Čo je v balení

Používateľská príručka


Hyperblade

Nádobka na krém (voliteľné)

Kufrík (voliteľné)



Type-C USB cable

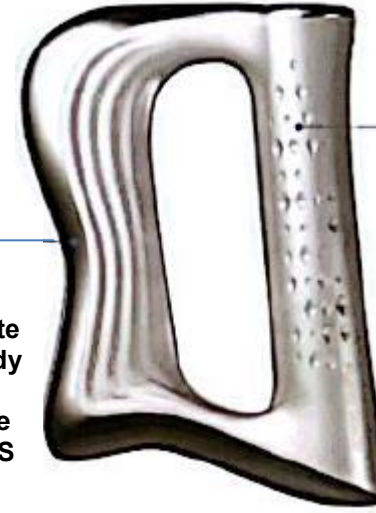

Dotykový spínač motora

- Keď je hyperblade v pracovnom režime, uchopíte rukoväť a motor sa automaticky spustí.
- Pri uvoľnení rukoväte sa motor automaticky zastaví.

Kovový Hyperblade

- Keď je hyperblade v pracovnom režime, uchopíte rukoväť, dotknite sa pokožky na tri sekundy a NMES sa spustí.
- Ak sa kovový hyperblade pokožky nedotkne, NMES sa nespustí.


Pokyny ku prevádzke

NMES dotykový spínač

- Pre spustenie kliknite na spínač
- Pokiaľ sa Hyperblade nedotkne pokožky NMES sa nespustí

Kontrolka úrovne výkonu

- Nízka úroveň
- Stredná úroveň
- Vysoká úroveň

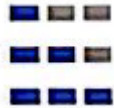




Ovládacie tlačidlo

- Podržte toto tlačidlo stlačené na dve sekundy a zariadenie sa zapne
- Krátke stlačenie tlačidla, prepne úroveň výkonu
- Podržte toto tlačidlo stlačené na dve sekundy a zariadenie sa vypne
- Zariadenie sa vypne automaticky, ak bude ponechané nečinné 1 min.
- Pri nabíjaní bude blikať modrá kontrolka a po plnom nabití sa zapne
- Počas činnosti bude svietiť modrá kontrolka stálym svetlom

Použitie

Krok	Grafika	Úkon / Varovanie
Aplikujte krém alebo vodu		Na miesto, ktoré chcete masírovať naneste rovnomerne krém alebo vodu, za účelom dosiahnutia lepšieho pocitu a pohodlia z masáže. Vodu alebo krém naneste podľa potreby. Vo všeobecnosti, ak na masírovanom mieste pocítite bolesť, aplikujte na dané miesto vodu alebo krém.
Spustenie		Podržte stlačený spínač na dve sekundy a zariadenie sa zapne. Súčasne sa rozsvieti kontrolka zapnutia a indikátor úrovne výkonu.
Prepínanie úrovne výkonu		Nakrátko stlačte spínač a zvýšite tak úroveň výkonu. Nedržte stlačený spínač na dlhšie ako 3 sekundy.

Masáž		Uchopte rukoväť zariadenia, dotknite sa kovovej hyperlady pokožky na tri sekundy, vyvíjajte tlak a posúvajte sa tam a späť, pre masáž pokožky.
		<p>1 - NMES Neuromuskulárna elektrická stimulácia</p> <p>2 - Keď je zariadenie vo funkčnom modeli, uchopte rukoväť a motor stále beží. Iba kovový Hyperblade sa dotýka pokožky, ktorá dokáže NMES fungovať.</p> <p>3 - Kvôli nerovnomernému rozloženiu meridiánu a rôznej hĺbke meridiánu v našom tele je pocit NMES odlišný v rôznych častiach tela, dokonca aj pri rovnakej úrovni výkonu, preto si vyberte inú úroveň výkonu pre masírovanie rôznych častí tela.</p> <p>4 - Prístroj dokáže automaticky vyhľadať akúttny bod, keď elektrická stimulácia veľmi evidentne cíti v nejakej časti, pevným stlačením masírujete.</p> <p>5 - Tento dizajn zariadenia s vyvážením elektrického prúdu, ak sa pri uchopení rukoväte cítite veľmi silný, použite na masáž úzku drážku kovovej hyperblade</p>

Vypnutie		Podržte stlačený spínač na dve sekundy a zariadenie sa vypne. Zariadenie sa automaticky vypne ak je ponechané bez aktivity dlhšie ako 1 min.
-----------------	--	---

Nabíjanie zariadenia

- Vyberte USB kábel
- Vložte C konektor do Hyperblade pre nabíjanie; druhý konektor kábla zapojte do adaptéra poskytujúceho primeraný výkon pre nabíjanie.
- Počas nabíjania bude kontrolka spínača blikať. Keď bude zariadenie plne nabité bude svietiť stálym modrým svetlom.

Požiadavky a pokyny

Problém	Príčina	Pokyn
Nie je možné zapnúť	Vybitá batéria	Nabite batériu
Nie je možné nabiť	Poškodený USB kábel	Vymeňte USB kábel
	Nesprávne pripojený USB kábel	Znovu pripojte USB kábel
Žiadne NMES alebo NMES nie je evidentné	Nebola nastavená úroveň výkonu	Nastavte na najvyššiu úroveň
	Žiadny meridián pod masážnymi časťami	Masírujte inú časť tela
	Meridián je v masážnych partiách veľmi hlboký	Na masáž použite úzku kovovú drážku Hyperblade

	Veľmi vysoký odpor pokožky	Použite krém alebo vodu
	Kovový Hyperblade ešte nie je v kontakte s pokožkou 3 sek.	Nech je Metal hyperblade v kontakte s kožou aspoň 3 sek.
NMES príliš silný alebo spôsobuje bolesť	Suchá pokožka	Použite krém alebo vodu
	Používate najvyššiu úroveň výkonu	Znížte úroveň výkonu
	Masírujete už príliš dlho	Zastavte masáž
Motor nepracuje	Vybitá batéria	Nabite
	Nedržíte rukoväť	Zmeňte spôsob uchopenia zariadenia
	Nemáte čisté ruky	Umyte si ruky

Motor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batéria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
USB kábel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Príslušenstvo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tento list bol zostavený podľa smernice Sj/t11364

O: Znamená, nebezpečná látka pod limitom GB/T 26572-2011

X: Znamená, nebezpečná látka nad limitom GB/T 26572-2011

Vyhlásenie k nebezpečným látkam

Názov dielu	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Plastový kryt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kovový Hyperblade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Doska spojov	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Záručný List

Ďakujeme, že ste si vybrali Hyperblade

Aby ste mohli toto zariadenie používať bezpečne, najprv si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Záručné záznamy

Meno používateľa: _____ Č. produktu: _____

Názov/Model: _____ Dátum zak.: _____ R _____ M

Dátum	Obsah údržby	Technik	Poznámka

Podmienky záruky:

- Ak nemôže Hyperblade pracovať normálne (žiadne falošné poškodenie), do troch mesiacov od zakúpenia ho môžete vymeniť za nový. Ale musíte zachovať balenie a zariadenie neporušené.
- Záruka začína dňom zakúpenia. Hyperblade má ročnú záruku a doživotný servis (Príslušenstvo nespadá do záruky).
- Záruka je platná iba v prípade používania Hyperblade podľa pokynov uvedených v príručke.
- Každé falošné poškodenie alebo rozobratie zariadenia, ktoré spôsobí jeho nefunkčnosť nespadá pod záruku. Pri oprave je potrebné sa preukázať záručným listom.