

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## ZARIADENIE NA MASÁŽ KRKU

KFL-701




Tento produkt je kozmetický masážny prístroj na krk a tvár. Využíva akustické vibrácie a tepelnú masáž na zlepšenie krvného obehu, spomalenie starnutia epidermálnych buniek a redukciu krčných línií.

### Vlastnosti produktu

1. Lymfatická masáž;
2. Omladenie dekoltu;
3. Zmierni línie tváre;
4. Vyhľadanie línií tváre;
5. Funkcia vypnutia pri nepoužívaní;

### Štruktúra produktu

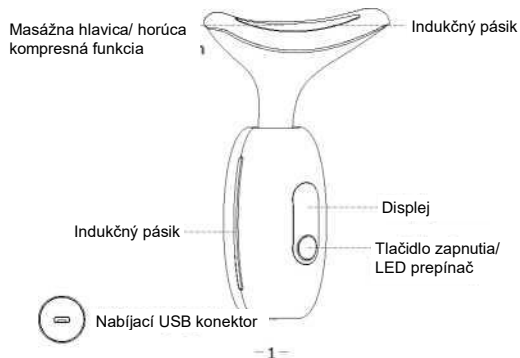

### Parametre produktu

Názov produktu: Odstraňovač vrások na krku	
Rozmery produktu: 92*40*118mm	
Spôsob nabíjania: USB	Čistá hmotnosť produktu: 66g
Pracovné napätie: 3.7V=	Kapacita batérie: 600mAh
Nabíjacie napätie: 5V=	Čas nabíjania: 120min

### Popis farebného podsvietenia



#### Červené svetlo

Funkcia: Jemná pokožka, obnoví elasticitu pokožky  
Vlnová dĺžka je 620 nm



#### Zelené svetlo

Účinok: Rozjasňuje pleť a robí pleť opäť jemnou a žiarivou.  
Vlnová dĺžka je 530 nm



#### Modré svetlo

Funkcia: Zmenší póry a zníži tvorbu mastnej pokožky  
Vlnová dĺžka je 415 nm

-2-

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte Používateľskú príručku a pre budúce použitie si ju riadne uschovajte.

## Prevádzkové pokyny

1. Stlačte tlačidlo "Zapnúť" na 1,5 sekundy, bzučiak vydá dlhý zvuk. Keď je okolitá teplota 25 °C a teplota kontaktného povrchu je 42 °C ± 5 °C, skrášľovacia lampa bude svietiť jasne na červeno. Skrášľovacia lampa bude v cykle červená-zelená-modrá-červená-zelená-modrá-modrá. Podržte červená-zelená-modrá-červená-zelená-modrá-modrá. Podržte 1,5 sekundy dlhšie a bzučiak sa vypne s hlasným zabzučaním.
2. Keď rybí chvost rozsvieti na červeno, na displeji sa na dlhú dobu rozsvieti "Hot" a červené svetlo sa zmení, keď sa prepne farebný režim.
3. Pri nabíjaní cyklicky bliká červené, zelené a modré svetlo. Pri plnom nabití bude svietiť zelené svetlo.
4. Červené svetlo bliká, keď je batéria takmer vybitá.

## Spôsoby použitia



Po očistení rovnomerne naneste na krk produkty starostlivosti o pleť



Vyberte si správne svetlo podľa osobných potrieb



Zapnite ho dlhým stlačením tlačidla napájania na 1,5 sekundy



Masážna hlavica prilieha k pokožke zdola nahor

## Kroky na použitie

### Kroky pre použitie na krku

1. Produkty starostlivosti o pleť naneste rovnomerne na krk.
2. Farbu svetla si vyberte podľa osobných potrieb.
3. Po zapnutí napájania, keď sa ruka dotkne pásika senzora a masážna hlavica sa dotkne krku, spustí sa vibrácia.
4. Masážna hlavica sa dvíha zdola nahor až po krk.

### Kroky aplikácie na tvár

1. Produkty starostlivosti o pleť naneste rovnomerne na tvár.
2. Farbu svetla si vyberte podľa osobných potrieb.
3. Masážna hlavica sa prispôbi pokožke tváre, zdvihnutie ju zdola nahor, Stereo tvarovanie.



## Upozornenie pre užívateľa

1. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Produkt sa nabíja pomocou USB kábla. Keď je batéria takmer vybitá, nabitie do plného nabitia trvá približne 2 hodiny a môže sa používať nepretržite 4 až 5 hodín.
3. Výrobok má funkciu vypnutia, ak sa nepoužíva. Keď sa nepoužíva, automaticky sa vypne po 3 minútach (bez prevádzky do 3 minút).
4. Počas nabíjania je tento výrobok zakázané používať.
5. Výrobok má funkciu ohrevu. Povrchová teplota pri kontakte s pokožkou je 42°C±5°C.
6. Výrobok nie je vodotesný, nevkladajte ho do vody.

7. Výrobok umiestnite na suché a vetrané miesto, držte ho mimo priameho slnečného žiarenia a mimo korozívnych chemikálií.
8. V prípade poškodenia obalu alebo elektronickej poruchy zariadenia ho okamžite prestaňte používať.
9. Aby sa predišlo nehodám, neodporúča sa používať tento produkt:
  - (1) Osobám pod lekárskeho dohľadom a s fyzickými abnormalitami
  - (2) Tehotným ženám, ležiacim ženám, deťom
  - (3) Pacientom s infekčnými chorobami
  - (4) Osobám s poruchou citlivosti kože alebo kožnými abnormalitami
  - (5) Pacientom s akútnym ochorením

## Záručné podmienky

Tento produkt má záručnú dobu 1 rok a celoživotnú údržbu; Počas záručnej doby môžu byť poruchy vzniknuté bežným používaním v súlade s návodom na použitie (posúdené oficiálnym personálom spoločnosti) bezplatne opravené; Ak nastane počas záručnej doby jedna z nasledujúcich situácií, nebude záruka uplatnená:

- (1) Neposkytnutie platného potvrdenia o kúpe;
  - (2) Porucha a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním a nesprávnou opravou;
  - (3) Porucha alebo poškodenie spôsobené prepravou, premiestnením alebo pádom po kúpe;
  - (4) Zlyhanie a poškodenie spôsobené inými neodvráťiteľnými vonkajšími faktormi;
  - (5) Nesprávne používanie spôsobuje poškodenie zariadenia spôsobené vodou alebo inými roztokmi;
  - (6) Poškodenie spôsobené použitím iných zdrojov energie, ako je špecifikované napätie;
- Ak výrobok nespĺňa záručné podmienky a je potrebné ho opraviť, spoločnosť bude spotrebiteľovi účtovať poplatky za vykonaný servis.